

UPPTÄCK **OXY** EFFEKTEN- NU OCKSÅ I **XL**

Incidin™ OxyFoam S & OxyWipe S

Bruksfärdig Hi-speed H₂O₂, rengörings- och desinfektionsmedel med sporicidal effekt

Incidin Oxyfoam S och Incidin Oxywipe S har en innovativ sammansättning med en patenterad väteperoxidlösning som verkar över ett brett spektrum.

Produkterna är effektiva mot ett brett spektrum av patogener och lämnar inga aktiva rester efter intorkning.

Incidin™ Oxyfoam S och Oxywipe S

- ▲ innehåller Hi-speed H₂O₂ som aktiv substans
- ▲ Den aktiva substansen bryts ner till syre och vatten
- ▲ Baktericidal, virucidal och sporicidal effekt
- ▲ Utmärkt materialkompatibilitet



Incidin™ OxyFoam S & OxyWipe S

Bruksfärdig Hi-speed H₂O₂, rengörings- och desinfektionsmedel med sporicidal effekt



Sporicidal mot C.difficile SUSPENSIONS TEST



Virucida RENA FÖRHÅLLANDEN



Baktericida (EN 13727 / 16615)

Egenskaper	Fördelar
EFFEKTIVA	Bredspektrumeffekt kort kontakttid
SÄKRA	Aktiv substans bryts ner till syre och vatten. Utmärkt materialkompatibilitet
ENKLA ATT ANVÄNDA	Rengöring och desinfektion i ett steg Bruksfärdig lösning sk "ready to use"

MIKROBIOLOGISKA OCH VIROLOGISKA TESTRESULTAT


EFFEKTIVITET I BRUKSLÖSNING	OxyFoam S KONTAKTTID	OxyWipe S KONTAKTTID
Desinfektion av ytor i enlighet med VAH metod 2015 (inkl. EN16615), smutsiga förhållanden		
Bactericidal, yeasticidal	5 min	15 min
Fungicidal	5 min	30 min
Mycobactericidal	15 min	30 min
Testad enligt RKI:s rekommendation 01/2004*		
Effective against enveloped viruses acc. to RKI recommendation 01/2004*	15 sec	30 sec
Noro (MNV)*	30 min	60 min
Adeno*	30 sec	1 min
Polyoma SV40*	30 sec	30 sec
Rota*	15 sec	15 sec
EU-normer (rena & smutsiga förhållanden)		
EN 13727 (bactericidal)	1 min	2 min
EN 13624 (yeasticidal)	1 min	15 min
EN 13624 (fungicidal)	5 min	30 min
EN 14348 (tuberculocidal, mycobactericidal)	5 min	30 min
EN 14476 (virucidal)	2 min** / 30 min	30 min**
EN 14476 Adeno	30 sec	30 sec
EN 14476 (limited spectrum virucidal)	1 min (clean conditions) 15 min (dirty conditions)	15 min
EN 14476 Noro	1 min (clean conditions) 15 min (dirty conditions)	15 min
EN 13704 (sporicidal)**	30 min	60 min
EN 13704 (C. difficile)**	3 min	15 min
EU-normer (smutsiga förhållanden)- 4-field-test		
EN 16615 (bactericidal)	1 min	2 min
EN 16615 (yeasticidal)	1 min	1 min
EN 16615 (fungicidal, tuberculocidal, mycobactericidal)	5 min	5 min
Sporicidal (method EN 16615)**	15 min	30 min
C. difficile (method EN 16615)**	5 min	5 min

* DVV 2015 (suspension test) ** clean conditions

INCIDIN OXYFOAM S BRUKSANVISNINGAR



- 1 Spraya ytan
- 2 Stryk ut så att hela ytan blir blöt
- 3 Låt torka

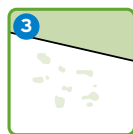

- 1 Applicera på en ren torkduk
- 2 Stryk ut så att hela ytan blir blöt
- 3 Låt torka

ECOLAB AB
Glasfibergratan 10
Box 164, SE- 125 24 Älvsjö
+46 (0)8 603 22 00

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0)2173-599-1900



EFFEKTIVT.
SÄKERT.
ENKELT.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bruksfärdig, snabbverkande, sporicidal ytdesinfektion med rengörande effekt



- ▲ I enlighet med Direktiv 93/42/EEC: för medicinsk teknisk utrustning



- ▲ Biocid för ytor

BRUKSANVISNING

Incidin Oxyfoam S: Spraya ytan och tillse att hela ytan är blöt. Torka ytan med en ren torkduk och låt sedan självtorka. Alternativt spraya på en ren torkduk och fördela på hela ytan. Låt ytan självtorka.

Skölj inte av.

Incidin Oxywipe S: Ta en servett. Torka norggrant hela ytan. Låt ytan självtorka. Skölj inte av. Stäng locket efter användning.

Användningen av rengörings- och desinfektionsmedel ersätter inte den regelbundna rengöringen. Före användning på medicinskt tekniska produkter, läs alltid tillverkarens instruktioner och rekommendationer, inklusive materialkompatibilitet.

Om immersion av semikritisk medicinsk teknisk utrustning (t ex prober & TEE prober) inte är möjligt, desinficera då utrustningen enligt bruksanvisningen, beskriven ovan. Skölj därefter av utrustningen noggrant med vatten. Använd inte på oxidationskänsliga ytor som till exempel marmor, zink, koppar och mässing.

INNEHÅLL

Innehåll per 100g aktiv substans
Incidin Oxyfoam S: 1,5g väteperoxid
Incidin Oxywipe S: 1,5g väteperoxid

FÖRPACKNINGS- OCH BESTÄLLNINGSPÅRNING

PRODUKT	LEV-FÖRÖP	ART.NR
Incidin™ OxyFoam S	6 x 750ml	3082910
Incidin™ OxyFoam S	2 x 5L	3087450
Incidin™ OxyWipe S	6 x 100 (20 x 20 cm)	3083020
Incidin™ OxyWipe S XL	6 x 50 (25 x 37 cm)	
Tappkran	10 st	10033873
Vägghållare till Incidin Oxywipe S	6 x 1 st	10033877
Dunköppningsverktyg	1 st	10033880

FÖRVARING

Förvaras torrt och svalt (ej över 25C) i originalförpackning. Skyddas från direkt solljus. Hållbarhet efter öppnande:
Incidin Oxyfoam S: t.o.m sista förbrukningsdag
Incidin Oxywipe S: 3 månader

Referenser
1. Incidin™ OxyFoam S

ANVÄND BIOCIDER PÅ ETT SÄKERT SÄTT. LÄS ALLTID ETIKETT OCH PRODUKTINFORMATION INNAN ANVÄNDNING. PRODUKTEN ÄR ENBART AVSEDD FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

