



## NEUTRALT AVRINNINGSMEDEL FÖR INSTRUMENT

### Anios RL

#### NEUTRALT AVRINNINGSMEDEL FÖR INSTRUMENT

- Torkningsaktivator för ett snabbt och fläckfritt resultat
- Hög kompatibilitet med polysulfoner
- Anpassat för användning i alla typer av maskiner



# Anios RL

Neutralt avrinningsmedel för instrument



Anios RL  
5 L dunk

## PRODUKTEGENSKAPER

- Transparent klar vätska
- pH koncentrerad produkt vid 20°C: ca 7,2
- pH i brukslösning vid 0.08%\*: ca 5,8
- pH i brukslösning vid 0.3%\*: ca 6,2
- Densitet vid 20°C: 1.013

\*pH-mätningar under driftförhållanden ska alltid göras med hjälp av en pH-mätare med temperaturkompensation.

## FÖRPACKNINGS- OCH ORDERINFORMATION

PRODUKT	FÖRPACKNINGSSTORLEK	ARTIKEL NUMMER
Anios RL	2 X 5 L dunk	3112390
Anios RL	1 X 20 L dunk	3112190

## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Neutralt avrinningsmedel för kirurgiska och medicinska instrument. Ger ett snabbt och fläckfritt resultat.

## BRUKSANVISNING

Koncetrerad lösning. Används i brukslösning 0,08 - 0,3% i kallt eller varmt vatten (0,8-3ml per liter vatten), beroende på maskintyp.

## INNEHÅLL

Sammansättning av tensider, skumdämpare, stabiliseringsmedel och hjälpämnen.

## FÖRVARING


Farligt - vidtag försiktighetsåtgärder (utformade enligt gällande europeiska regler för klassificering och märkning av kemiska produkter). Förvaring: +5°C till +25°C.

## CERTIFIKAT

På begäran tillhandahåller vi gärna certifikat.


## MEDICINSK PRODUKT - ANVÄND MED FÖRSIKTIGHET

Vänligen läs produkt- och etikettinformation.

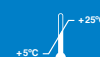

ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK.



 **LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Levererad Av:  
**ECOLAB AB**  
Glasfibergatan 10  
Box 164, SE-125 24 Älvsjö  
+46 (0)8 603 22 00  
www.ecolab.se

**ECOLAB**<sup>®</sup>

www.ecolab.se